



OB/OR Mobius®

A Major Advance in Minimally Invasive Pelvic Surgery And Cesarean Section Access

The Mobius Retractor creates a less traumatic, circular, completely self-retaining area of abdominal retraction, thus providing significantly greater exposure than traditional retractors. The Mobius retractor is composed of an elastic membrane attached to external and internal rings. The internal ring is inserted into the incision and the outer ring is quickly and easily rolled down, creating a natural inverting force, thereby simplifying setup and reducing the need for surgical assistance. After the procedure, the device is easily removed with one finger.

Benefits include:

- Greater Exposure: 360 degrees of elastic tension maximizes working area providing significantly greater exposure than traditional retractor.
- Lines Incision: Helps protect wound from contamination while helping to keep wound edges moist.
- Easily Placed and Removed: Inserted in seconds, the flexible ring slips gently into incision. Removed with one finger.
- Gentle Retraction: Soft materials and evenly dispersed tension promote post-operative patient comfort.

Applications:

Cystectomy | Total Abdominal Hysterectomy | Myomectomy | Tubal Ligation | Lapcolectomy
Gastric Bypas | Thoratomy - paraesophageal | hiatal hernia | Appendectomy | Splenectomy




شرکت تسنیم بهبود آرمان
نماینده انحصاری محصولات کوپر سرجیکال آمریکا در ایران

OB/OR Mobius®

ویژگی‌ها:

- حداقل برش، حداکثر دید
- کاهش احتمال عفونت و خونریزی
- کاهش دردهای پس از عمل جراحی
- بالاترین میزان ایمنی و بهره‌وری در عمل جراحی
- جایگذاری راحت و قرارگیری ثابت در طول عمل جراحی

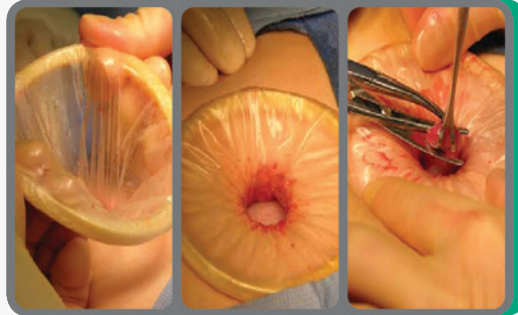


سایزها:

- دارای ۳ سایز به جهت استفاده در مینی‌لاپاراتومی‌ها (برش‌های ۱۴-۲ سانتیمتر)
- دارای ۲ سایز به جهت استفاده در سزارین (برش‌های ۱۷-۹ سانتیمتر)
- کاملاً مناسب برای بیماران چاق ($BMI > 30$)



شیوه استفاده:

- حلقه آبی تحتانی را فشرده (جمع) کرده و داخل شکم جای دهید. به آرامی حلقه را کشیده تا از جا افتادن آن اطمینان حاصل کنید و بافت به دام افتاده را با انگشت معاینه کنید.
- دست‌ها را در موقعیت مکانی ساعت ۱۱ و ۱ قرار داده و در عین حال از یک کمک در موقعیت ساعت ۱۲ بهره بگیرید. (به تصویر مربوطه مراجعه شود)

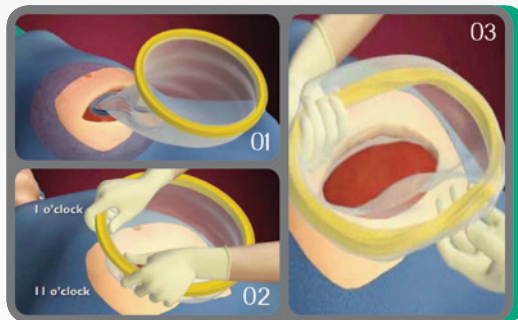

۳. حلقه بیرونی را ابتدا از چپ و سپس به دنبال آن از راست به سمت پایین چرخانده، انگشتان را از زیر حلقه برای رسیدن به کنش مناسب در موبیوس بچرخانید. این عمل را تا رسیدن به میزان دلخواه از فیلد مورد نظر ۲ تا ۳ بار تکرار کنید.

دارای تأییدیه FDA آمریکا



تسنیم‌بهبود آرمان

تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از پل رومی، خیابان موسیوند
خیابان کریمی، نبش کوچه ثابتی، شماره ۷۸، واحد ۶
تلفن: ۲۲۶۷۹۴۴۰
ایمیل: info@tasnimbehboud.com

